

multiCareⁱⁿ

MANUALE D'USO

*Dispositivo diagnostico
in-vitro per l'autocontrollo*



Introduzione	1
Il sistema multiCare-in	1
Il meter	2
Il display	3
Menù	3
Misurazione	4
Inserimento del data-chip	4
Come ottenere una goccia di sangue	6
Applicazione del sangue	7
Procedura per test glucosio	7
Procedura per test colesterolo e trigliceridi	8
Avvertenze	9
Le strisce multiCare-in	10
Soluzioni di controllo	11
Funzioni della memoria	12
Impostazioni generali	13
Modifica delle impostazioni	13
Impostazione del segnale acustico	14
Impostazione degli allarmi	14
Trasferimento dati ad un computer	15
Manutenzione e condizioni di conservazione	16
Cura e manutenzione	16
Condizioni di conservazione e misurazione	16
Messaggi di errore	17
Sostituzione delle batterie	20
Garanzia	21
Simboli	23
Caratteristiche tecniche	24

Il sistema

Grazie per avere scelto il sistema **multiCare-in**.

multiCare-in è un sistema nuovo, utile per il monitoraggio del glucosio, del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue.

multiCare-in utilizza due diverse tecnologie:

- amperometrica, con strisce **multiCare-in** glucosio elettrodo
- riflettometrica, con strisce **multiCare-in** colesterolo e trigliceridi

L'autocontrollo dei parametri glucosio, colesterolo e trigliceridi può essere utile ma i trattamenti da eseguire devono essere sempre concordati con il medico.

Informazioni sulla linea multiCare-in

La linea **multiCare-in** include tutto il necessario per il controllo degli analiti che si desidera determinare:

- **multiCare-in** strumento
- **multiCare-in** strisce
- Pungidito
- Lancette sterili
- **multiCare-in** soluzioni di controllo
- **multiCare-in** data manager software

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso all'interno della confezione delle strisce **multiCare-in** che si intende utilizzare e le istruzioni del pungidito all'interno della confezione dello strumento **multiCare-in**.

Striscia
GLUCOSIO
ELETTRODO



Striscia
COLESTEROLO



Striscia
TRIGLICERIDI




Il meter


1. **Display:** mostra i risultati dell'analisi, messaggi ed i risultati memorizzati nella memoria.
2. **Tasto di accensione,** premere questo tasto per:
 - a. Accendere o spegnere lo strumento.
 - b. Entrare nel menù IMPOSTAZIONI quando lo strumento è acceso.
 - c. Andare al passaggio successivo del menù IMPOSTAZIONI.
 - d. Uscire dal menù IMPOSTAZIONI.
3. **Tasto "+",** premere questo tasto per:
 - a. Entrare nel menù MEMORIA.
 - b. Richiamare i risultati precedenti nel menù MEMORIA.
 - c. Cambiare i parametri del display.
4. **Tasto "-",** premere questo tasto per:
 - a. Entrare nel menù MEMORIA.
 - b. Richiamare i risultati ottenuti nel menù MEMORIA.
 - c. Cambiare i parametri del display.
 - d. Cancellare le memorie.
5. **Inserimento della striscia:** lo strumento si accenderà automaticamente all'inserimento della striscia.
6. **Connessione PC:** connettore per trasferimento dati dello strumento ad un computer.
7. **Coperchio:** sollevare questa parte per la pulizia.
8. **Vano Batterie:** sportello a scorrimento per rimuovere le batterie.
9. **Inserimento del data-chip:** inserire il data-chip in questo spazio.
10. **Tasto Espulsione Striscia:** premere questo tasto per espellere la striscia utilizzata.

Fronte



Retro

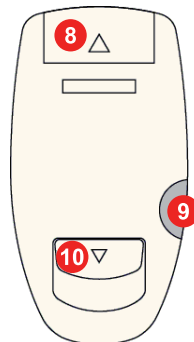

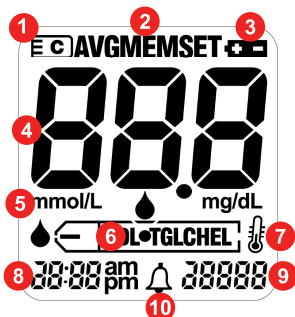

Il display

1. Indica l'inserimento del data-chip.
2. Menu in uso.
3. Indicatore batteria.
4. Risultato ottenuto e messaggi.
5. Unità di misura.
6. Analita.
7. Indicatore di temperatura.
8. Ora.
9. Data (giorno e mese).
10. Allarme acustico.

Menù

Il sistema **multiCare-in** ha tre menù principali a cui è possibile accedere con il data-chip inserito.

1. Menù STAND BY

Premere e rilasciare il tasto Accensione. Il simbolo della striscia inizierà a lampeggiare e lo strumento mostrerà il numero di data-chip, data e ora.

2. Menù MEMORIA

Premere e rilasciare il tasto “+” o “-” quando lo strumento è acceso. Lo strumento mostrerà il simbolo “MEM” nella parte alta del display.

3. Menù IMPOSTAZIONI

Premere per 3 secondi il tasto Accensione quando lo strumento è acceso.

Lo strumento mostrerà il simbolo “SET” nella parte in alto del display.

All'accensione dello strumento controllare sempre che la data e l'ora siano corrette.

Inserimento del data-chip


Lo strumento **multiCare-in** utilizza un data-chip che si trova all'interno di ogni confezione di strisce.

Sarà necessario cambiare il data-chip nei seguenti casi:

- a. Prima di utilizzare una nuova confezione di strisce
 - b. Ogni volta che si cambia l'analita.
1. Rimuovere il data-chip dalla confezione di strisce reattive.
 2. Inserire il data-chip nell'apposito spazio posto nella parte laterale dello strumento.
 3. Premere leggermente il data-chip fino al completo inserimento.



4. Premere il tasto di Accensione e controllare che i tre numeri relativi al numero di data-chip compaiano sul display e corrispondano a quelli stampati sul flacone di strisce.

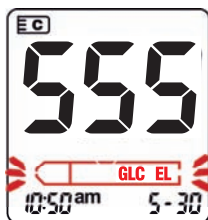

5. Non sarà possibile effettuare il test se il data-chip non è inserito nel meter.
6. Analiti:

GLC EL=GLUCOSIO ELETTRODO



(BLUE)

CH = COLESTEROLO





(VERDE)

TGL=TRIGLICERIDI



(GIALLO)

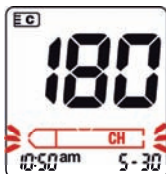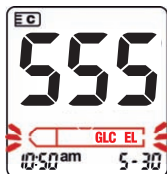

Come ottenere una goccia di sangue

Per effettuare una misurazione con il sistema **multiCare-in** è necessario prelevare una goccia di sangue capillare con la seguente procedura:

- Lavare le mani con acqua calda per intensificare la circolazione del sangue nelle dita e così facilitarne il prelievo.
- Asciugare accuratamente le mani.
- Controllare che il dito da pungere sia completamente asciutto.
- Preparare il pungidito contenuto nel kit **multiCare-in** inserendo la lancetta sterile (ago). Leggere attentamente le istruzioni relative all'utilizzo del dispositivo pungidito contenute all'interno del kit dello strumento.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso del pungidito contenute all'interno della confezione dello strumento.

Usare una lancetta nuova, non danneggiata, per ciascun prelievo di sangue e usare il pungidito soltanto su se stessi.

Prima dell'inserimento, verificare che le lancette e la protezione delle lancette siano intatte.

Solamente una protezione della lancetta intatta garantisce la sterilità della lancetta.

Conservare la protezione della lancetta così che la stessa possa essere sigillata in sicurezza dopo l'uso.



Applicazione del sangue

Leggere attentamente le istruzioni d'uso delle strisce con le quali si vuole effettuare la misurazione.



- 1. Premere il tasto di Accensione dopo aver inserito il data-chip.**
Il numero del data-chip che apparirà sul display dovrà corrispondere a quello stampato sul flacone di strisce.
In caso contrario contattare il servizio di assistenza.

- 2. Prendere una striscia dal flacone ed inserirla nello strumento con la parte stampata o colorata rivolta verso l'alto fino a che non si avvertirà uno scatto e lo strumento emetterà una segnalazione acustica.**



Procedura per il test glucosio:

- 3a. Pungere il dito con l'apposito pungidito e lancetta sterile.**
Avvicinare il dito all'estremità della striscia che fuoriesce dallo strumento.
Lasciare che il sangue venga automaticamente aspirato fino a visualizzare i segmenti in movimento sul display.

Se il volume non fosse sufficiente la lettura non inizierà.

Procedura per test colesterolo e trigliceridi

3.b Mettersi seduti per un minuto con il braccio lungo il corpo.




Massaggiare il polpastrello da pungere per aumentare il flusso di sangue.

Pungere il dito con l'apposito pungidito e lancetta sterile, eliminare la prima goccia e premere per ottenere una seconda goccia.

Deporre la goccia di sangue sull'area bianca circolare della striscia che fuoriesce dallo strumento. Attendere finchè sul display non appariranno i segmenti in movimento.



4. Lo strumento emetterà una segnalazione acustica ed il risultato verrà automaticamente visualizzato sul display e memorizzato dallo strumento (riferirsi alle istruzioni delle strisce che si stanno usando per i tempi di attesa).

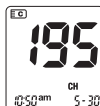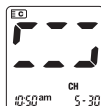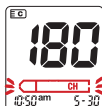

5. Premere il tasto di espulsione per rimuovere la striscia utilizzata, puntando lo strumento verso il basso.

Avvertenze

Avvertenze

Se si ottengono risultati che non corrispondono al proprio stato di salute e alle sensazioni, eseguire il controllo dello strumento avvertire il proprio medico.

Se si ottengono valori estremi troppo alti (Hi) o troppo bassi (Lo), immediatamente contattare il proprio medico.

Quando la misurazione è completata, si può spegnere il **multiCare-in**, altrimenti si spegne automaticamente dopo 60 secondi.

L'ultimo valore misurato, insieme con data e ora, viene memorizzato nella posizione 1 della memoria dello strumento.

I valori precedentemente misurati vengono memorizzati nelle posizioni 2, 3 etc. a partire dal più recente.

Come richiamare dalla memoria il valore misurato e come cancellare i valori memorizzati è descritto a pagina 12.

Le strisce e i materiali usati devono essere smaltiti propriamente, evitando contaminazioni.

Per lo smaltimento dello strumento riferirsi alle normative vigenti per i rifiuti elettrici ed elettronici.



In un laboratorio ed in un ospedale devono essere seguite le procedure di sicurezza biologica nel maneggiare materiale potenzialmente infetto, soprattutto quando si eseguono misurazioni su pazienti diversi.

Pulire lo strumento regolarmente e smaltire le strisce usate in modo tale da assicurare che non ci sia rischio di infezione per altre persone.



Le strisce multiCare-in

L'uso corretto delle strisce **multiCare-in** è molto importante per avere risultati accurati.

Si deve tenere conto quindi dei seguenti punti:

- Le strisce sono sensibili alla luce e all'umidità, conservare le strisce soltanto nel loro barattolo originale.
- Proteggere il barattolo dalla luce del sole diretta e conservarlo ad una temperatura tra 5 e 30 °C (41-86°F).
- Usare le strisce immediatamente dopo averle prelevate dal barattolo e richiudere il barattolo immediatamente col proprio tappo.
- Le strisce non devono essere usate dopo la loro data di scadenza.
- Scrivere sul barattolo la data di prima apertura: le strisce devono essere usate entro 90 giorni dopo la prima apertura del barattolo.
- Non usare strisce che sono state danneggiate.
- Leggere attentamente le istruzioni inserite nella confezione di strisce.
- Effettuare le misurazioni solamente con strisce **multiCare-in** originali.

Soluzioni di controllo multiCare-in

Leggere attentamente le istruzioni d'uso contenute nella confezione delle soluzioni di controllo che si desidera utilizzare.

È possibile controllare il funzionamento dello strumento **multiCare-in** usando le soluzioni di controllo **multiCare-in**.

Le soluzioni di controllo si possono reperire come un accessorio presso i rivenditori specializzati.

La soluzione di controllo è applicata sulla striscia così come il sangue.

Quando si effettua la prova con la soluzione di controllo, il risultato ottenuto deve rientrare nell'intervallo indicato sull'etichetta del barattolo di strisce che si stanno utilizzando.

In questo modo si può imparare il modo giusto di usare **multiCare-in** ed allo stesso tempo se ne controlla il funzionamento.

Annotare sul flaconcino della soluzioni di controllo la data in cui viene aperta per la prima volta.

La soluzione di controllo deve essere utilizzata entro 90 giorni dalla data di prima apertura.

Controllare che la data di scadenza non sia stata superata.

Quando eseguire una prova di funzionamento usando le soluzioni di controllo:





- Quando si sospetta un difetto dello strumento **multiCare-in**.
- Quando si sospetta un cattivo funzionamento o una misurazione errata.

Il risultato ottenuto con le soluzioni di controllo va eliminato dalla memoria dello strumento per non influire sulle medie della glicemia.

Richiamare e cancellare i risultati della memoria


Lo strumento **multicare-in** può memorizzare 500 risultati per tutti gli analiti, dal più recente (1) fino al più vecchio (500).

Per poter richiamare i risultati dell'analita interessato è necessario inserire il chip corrispondente.

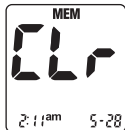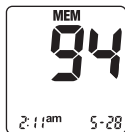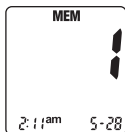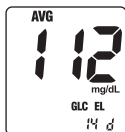


1. Dopo aver acceso lo strumento premere e rilasciare il tasto “+” o “-”. Lo strumento entrerà nel menù MEMORIA e la media dei risultati ottenuti verrà visualizzata.
2. Tenendo premuto il tasto “+” verrà visualizzato il numero 1 riferito al risultato più recentemente ottenuto. Quando si rilascia il tasto, viene mostrato il risultato.
3. Premendo di nuovo il tasto, si vedrà il numero 2.
4. Premere il tasto “-” insieme al bottone di Accensione per mezzo secondo per cancellare il risultato memorizzato
5. Premere il tasto “-” insieme al tasto di Accensione per 5 secondi per cancellare tutti i risultati in memoria.


Modifica delle impostazioni

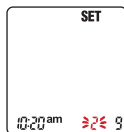

1. Premere e rilasciare il tasto di accensione per selezionare il mese. Premere e rilasciare il tasto "+" o "-" fino a che non verrà raggiunto il mese corretto.

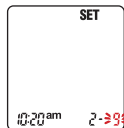

2. Premere e rilasciare il tasto di accensione per selezionare il giorno. Premere e rilasciare il tasto "+" o "-" fino a che non verrà raggiunto il giorno corretto.

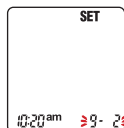

3. Premere e rilasciare il tasto di accensione per cambiare il formato della data. Premere e rilasciare il tasto "+" o "-" per cambiare tra mese-giorno (mm-gg) o giorno- mese (gg-mm).



4. Premere e rilasciare il tasto di accensione per cambiare l'anno. Premere e rilasciare il tasto "+" o "-" fino a che non verrà raggiunto l'anno corrente. Lo strumento permette di cambiare l'anno dal 2007 fino al 2017.



5. Tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi. Lo strumento entrerà nel menù IMPOSTAZIONI e sarà possibile cambiare l'ora. Premere e rilasciare il tasto "+" o "-" fino a che non verrà raggiunta l'ora corretta.




6. Premere e rilasciare il tasto di accensione per poter selezionare i minuti. Premere e rilasciare il tasto "+" o "-" fino a che non verranno raggiunti i minuti corretti.



7. Premere e rilasciare il tasto di accensione per cambiare il formato dell'ora. Premere e rilasciare il tasto "+" o "-" per modificare il formato 12 o 24 ore.





8. Premere e rilasciare il tasto di accensione per cambiare l'unità di misura. Premere e rilasciare il tasto "+" o "-" per cambiare tra mg/dL o mmol/L.

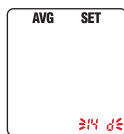

9. Premere e rilasciare il tasto di accensione per selezionare il numero dei giorni per la media delle misurazioni. Premere e rilasciare il tasto "+" o "-" fino a che non sarà raggiunto il dato corretto (0,7,14,21,28 giorni – "0" significa che lo strumento non mostrerà nessuna media delle misurazioni).

Impostazione del segnale acustico

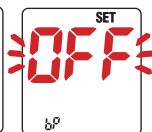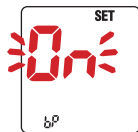

1. Accendere lo strumento e tenere premuto il tasto di accensione per entrare nel menu. Premere e rilasciare il tasto di accensione finché non viene mostrato "bP" fisso e "ON" lampeggiante sul display.
2. Premere il tasto "+" o "-" per abilitare o disabilitare i segnali acustici.



Impostazione degli allarmi



Per impostare gli allarmi seguire le seguenti istruzioni:

1. Premere e rilasciare il tasto accensione dello strumento. Premere il tasto accensione per 3 secondi per entrare nel menu impostazioni. Premere e rilasciare finché non viene mostrato l'icona dell'allarme fissa e '0' lampeggiante sul display.

2. Premere “+” o “-” per selezionare il numero dell’allarme da inserire (0, 1, 2 o 3).
3. Premere il tasto di accensione di nuovo per selezionare l’ora e i minuti relativi all’allarme che si sta impostando.
4. Per poter uscire dal menù IMPOSTAZIONI in qualsiasi momento è sufficiente tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi. Gli allarmi sono disattivati se sono tutti impostati su orario 12.00am o 0.00.

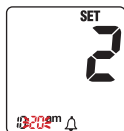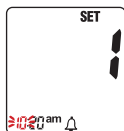

Trasferimento dati ad un computer

Tutti i risultati dei tests vengono memorizzati nello strumento **multiCare-in** e possono essere trasferiti ad un computer.



1. Installare il software seguendo le istruzioni nel relativo manuale d'uso.
2. Inserire il cavo di connessione nella porta USB del computer e nel connettore dello strumento posto nella parte in alto.
3. Premere e rilasciare il tasto di accensione. Il messaggio “PC” apparirà sul display.
4. Impostare il software del computer in modo da poter ricevere le informazioni dallo strumento.
Dopo aver trasferito i risultati è possibile spegnere lo strumento premendo il tasto di accensione e rimuovendo il cavo seriale dal connettore dello strumento.

Cura e manutenzione

Per la determinazione del glucosio non è necessario effettuare particolari operazioni di pulizia, se non per la parte esterna dell'apparecchio qualora contaminata da sangue o altro materiale (polvere, pelucchi, ecc.). In questo caso effettuare la pulizia utilizzando solo un panno inumidito con acqua fredda o una soluzione di alcol 70%.

Dato che per la determinazione di colesterolo o trigliceridi lo strumento utilizza un sistema di misurazione ottica, i componenti devono essere sempre puliti. Per effettuare la pulizia della parte ottica, sollevare il coperchio e detergere con un panno inumidito con acqua la superficie di vetro dell'ottica. Dopo aver pulito, asciugare accuratamente il supporto plastico di lettura, senza graffiarlo.

Nel caso di misurazioni effettuate su più persone, come per esempio in un ospedale, pulire lo strumento dopo ogni misurazione con una soluzione di alcool 70% prima di effettuare la misurazione seguente.



Condizioni di conservazione e misurazione

Per assicurare l'accuratezza di ogni misurazione, è essenziale che alcune condizioni siano soddisfatte.

La misurazione con le strisce **multiCare-in** deve essere effettuata tra 10 e 40 °C (50-104 °F).

Il kit **multiCare-in** (strumento e strisce) non deve essere conservato a temperature sotto 5°C (41 °F) o sopra 30°C (86 °F).

Avvertenze

Se lo strumento è troppo freddo o troppo caldo (es. dopo essere rimasto in una autovettura a temperatura molto bassa o alta) permettere allo strumento di raffreddarsi o scaldarsi lentamente a temperatura ambiente (circa 20 minuti).

Messaggi di errore




Messaggi di errore	Problemi	Soluzioni
E01	La misurazione è stata effettuata ad una temperatura fuori dall'intervallo consentito.	Portare lo strumento in una zona con temperatura compresa nell'intervallo consentito e attendere che lo strumento sia equilibrato con la temperatura esterna.
E02	La striscia è usata	Utilizzare una striscia nuova.
E02	La striscia non è correttamente inserita.	Inserire di nuovo la striscia controllando che non rimanga alzata rispetto al suo supporto.
E02	Il sangue è stato applicato sulla striscia senza avere prima visualizzato sul display la goccia lampeggiante.	Prendere una nuova striscia, inserirla nello strumento e solo dopo aver visualizzato la goccia lampeggiante sul display applicare il sangue.
E02	La finestra di lettura dello strumento è sporca.	Aprire lo sportello pulire la finestrina di vetro con un panno inumidito. Non utilizzare solventi e saponi.
E03	La striscia è stata rimossa dallo strumento prima dell'applicazione della goccia di sangue.	Spegnere lo strumento con il tasto accensione. Inserire di nuovo la striscia e applicare il sangue senza rimuoverla dallo strumento.
E04	La striscia che si sta usando non corrisponde all'analisi del data-chip inserito.	Rimuovere il data-chip e utilizzare quello relativo alle strisce che si stanno utilizzando e controllare che il simbolo dell'analisi sul display corrisponda.

Messaggi di errore

Messaggi di errore	Problemi	Soluzioni
E04	Data-chip errato.	Rimuovere il data-chip errato ed inserire il data-chip corrispondente al test in uso.
E05	Errore di lettura del data-chip o errore del data-chip.	Rimuovere ed inserire di nuovo il data-chip. Se continua ad apparire E05, contattare il servizio clienti multiCare-in.
E06	La quantità di sangue applicato non è sufficiente.	Ripetere il test con una striscia nuova ed applicare una quantità di sangue maggiore.
E07	Non è stato inserito il data-chip.	Inserire il data-chip corrispondente alle strisce che si vogliono utilizzare.
LO	Il risultato è inferiore al limite di lettura dell'analita (vedi anche istruzioni per l'uso delle strisce).	Se il risultato non corrisponde alle proprie sensazioni ripetere il test. Se si ottiene di nuovo LO contattare il proprio medico per ulteriori informazioni.



Messaggi di errore

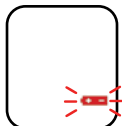

Messaggi di errore	Problemi	Soluzioni
HI	Il risultato è superiore al limite di lettura dell'analita (vedi anche istruzioni per l'uso delle strisce).	Contattare immediatamente il proprio medico, ripetere il test in un ospedale.
		Procurarsi nuove batterie.
		Sostituire le batterie per poter effettuare la misurazione (vedi pag. 20).
		Controllare la data di scadenza delle strisce e ripetere il test con strisce nuove. Il risultato lampeggiante non viene memorizzato.

Sostituzione delle batterie

Lo strumento **multiCare-in** è dotato di due batterie 3V al litio (tipo CR 2032). Se il simbolo di batteria appare fisso sul display dello strumento, si devono cambiare le batterie per compiere una misurazione.

Inserire sempre batterie nuove, non usate nello strumento.

Spegnere lo strumento prima di estrarre le vecchie batterie.

Controllare che le batterie nuove siano di tipo corretto prima di inserirle.


Per sostituire le batterie seguire le seguenti istruzioni:

- Aprire il vano batterie nella parte posteriore dello strumento (1) facendo pressione in corrispondenza della freccia stampata sul vano stesso.
- Rimuovere le batterie dal supporto plastico (2).
- Mettere le batterie nuove in modo che il polo negativo sia rivolto verso l'alto (3).
- Inserire e chiudere il vano batterie.

Le batterie esaurite possono essere smaltite presso ogni centro di raccolta.

Avvertenze

Se la batteria viene rimossa per più di 60 secondi è necessario reimpostare la data ed ora.

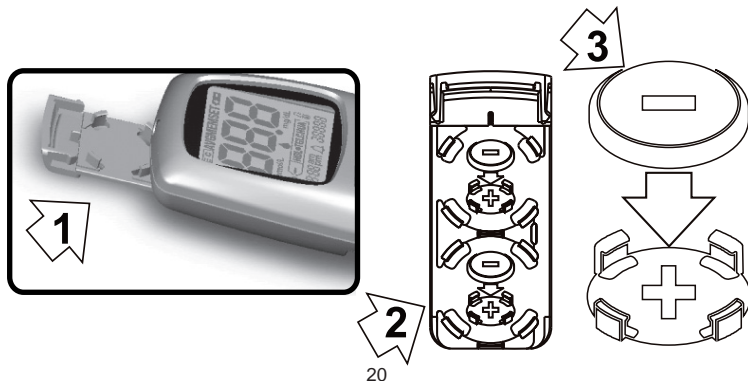

Informazioni su condizioni di garanzia

La Biochemical Systems International Srl garantisce all'acquirente che lo strumento **multiCare-in** sarà esente da difetti nei materiali e nella monodopera per 3 anni a partire dalla data di acquisto iniziale.

Durante il periodo dichiarato la Biochemical Systems International Srl dovrà sostituire lo strumento riscontrato difettoso con una versione equivalente o lo stesso modello.

La presente garanzia è soggetta ad eccezioni e limitazioni qui di seguito elencate. Questa garanzia è limitata alle sostituzioni dovute a difetti nelle parti o nella manodopera. Non verranno sostituiti strumenti che presentano malfunzionamenti o danni causati da uso improprio, alterazione, negligenza, manutenzione effettuata da personale non autorizzato dalla Biochemical Systems International Srl, incidenti, abuso o dall'utilizzo di strisce diverse da quelle **multiCare-in**.

Biochemical Systems International Srl si riserva il diritto di apportare modifiche alla costruzione dello strumento **multiCare-in** senza l'obbligo di inserire tali modifiche negli strumenti prodotti precedentemente.

Non verranno fornite altre garanzie per questo prodotto se non l'opzione di sostituzione sopra descritta.

È esclusa ogni responsabilità per danni speciali, indiretti o consequenziali.

Per potervi offrire anche in futuro informazioni ed un servizio ottimale, spedite la carta di registrazione che trovate nel retro di questa pagina debitamente compilata alla BSI.

È possibile registrare il vostro strumento anche tramite Internet www.biosys.it o via mail multicare@biosys.it



Cognome/Vorname/First name/Prenom/Nombre

Nome/Name/Surname/Nom/Appellido

Via/ Strasse/Street/Rue/Calle

CAP & Luogo/PLZ & Ort/Town & Post code/Localit /C.P. & Localidad

Telefono/Telefon/Telephone/T l phone/T l fono

Telefax/Fax/Faxnummer

E-mail

Numero di serie/Seriennummer/Serial number/Num ro de s rie/Num ro de serie

Data di acquisto/Kaufdatum/Date of purchase/Date d'achat/Fechade compra

In conformit  al D.L.gs. 196/2003 sulla tutela dei dati prsonali, la informiamo che le informazioni che vorr  fornirci saranno trattate al fine di inviarle il materiale da lei richiesto ed elaborare elettronicamente con l'adozione di misure idonee a garantire la sicurezza.

AUTORIZZO ☐

NON AUTORIZZO ☐

Data/Datum/Date/Fecha

Firma/Unterschrift/Signature

Spedire a / Send to / Envoyer   / Enviar a / Senden zu :

Spett.le

BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL s.r.l.

Via G. Ferraris, 220 - 52100 Arezzo - Italia

Simboli usati sulla confezione



Seguire le istruzioni



In-Vitro-Diagnosticum




Utilizzare entro il...



Numero Lotto...



Conservare ad una temperatura
compresa tra...

3 V 
2xCR 2032

3V corrente diretta e tipo di batteria



Marchio CE



Non gettare lo strumento nei normali rifiuti urbani. Effettuare una raccolta separata per RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) oppure consegnare al distributore all'atto dell'acquisto o della sostituzione di un apparecchio nuovo.

Caratteristiche tecniche

Range di misurazione:	10-600 mg/dL (0,6-33,3 mmol/L) glucosio elettrodo 130-400 mg/dL (3,3-10,2 mmol/L) colesterolo 50-500 mg/dL (0,56-5,6 mmol/L) trigliceridi
Batterie:	2x3V lithium bottone, tipo CR 2032. Le batterie possono essere usate per circa 1 anno con 3 misurazioni al giorno (approssimativamente 1000).
Dimensioni:	97 mm lunghezza; 49 mm larghezza; 20,5 mm altezza
Peso:	65 gr (incl. batterie)
Display:	LCD display
Limiti di temperatura:	da 10 a 40 °C (da 50 °F a 104 °F)
Limiti di umidità:	0% to 90% umidità relativa
Capacità memoria:	500 misurazioni con data e ora
Processo di trasmissione dati:	Cavo di connessione
Requisiti per le radiazioni elettromagnetiche:	Il marchio CE sullo strumento indica il rispetto dei requisiti sulla direttiva CE 89/336/EEC relativa alla compatibilità elettromagnetica e 73/23/EEC
Indicazioni per il personale di assistenza:	L'accuratezza dello strumento dovrebbe essere controllata ogni 3 anni
Smaltimento del meter quando questo è inutilizzabile:	Fare riferimento alla normativa locale vigente.



Servizio Clienti

Web: www.biosys.it
 e-mail: multicare@biosys.it
 Telefono: 0039.0575.984164



Biochemical Systems International Srl
 Arezzo - Italy

ED2008 REV03-IT

multiCare[®]in



BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL s.r.l.
Via G. Ferraris, 220 - Arezzo Italia
<http://www.biosys.it>
e-mail: multicare@biosys.it

